

■ 显微画像 · 运用综合系统


ImageStation

追加功能（分析篇）


1. 染色体分离

- 可自动分离 X 染色体与 T 染色体，自动分离前需进行一般分离。
- 对于无法自动分离的 X 染色体可通过辅助性的鼠标操作轻松进行手动分离。


(1) X 染色体的自动分离

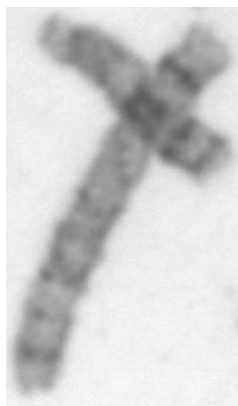

原图

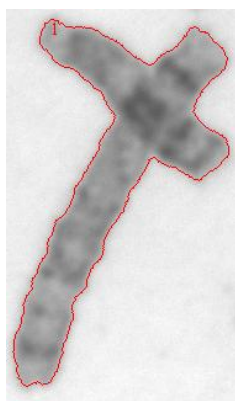

一般分离效果

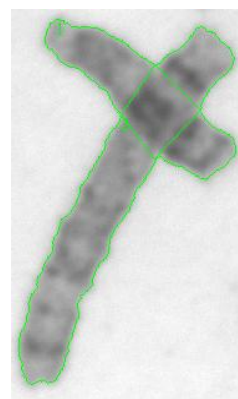


自动分离效果


(2) T 染色体的自动分离



原图

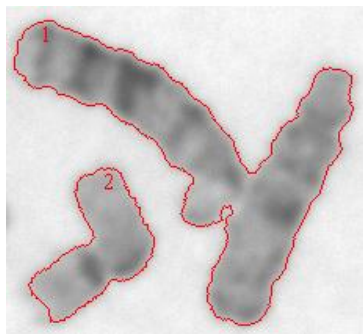


一般分离效果

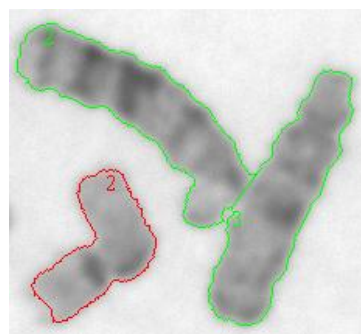


自动分离效果


(3) X 染色体的自动分离

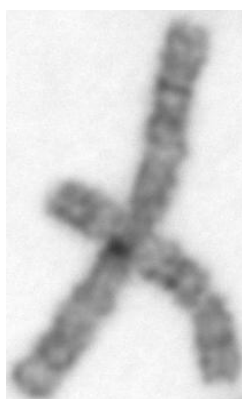


原图

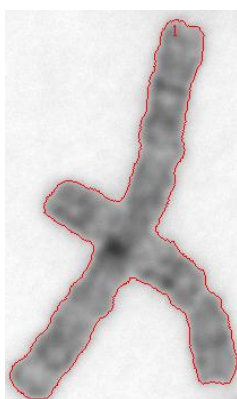

一般分离效果

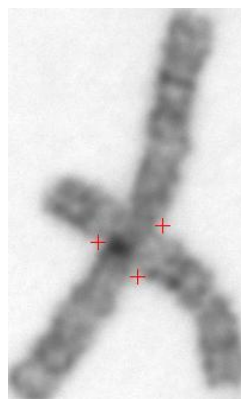


选择分离点

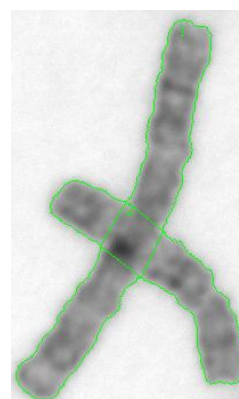

手动分离效果

2. 针状病毒分离


原图

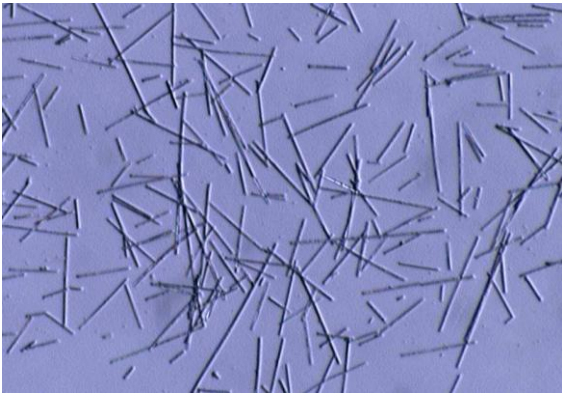


步骤 1：图像2值化并追踪轮廓线



步骤 2：细线化处理

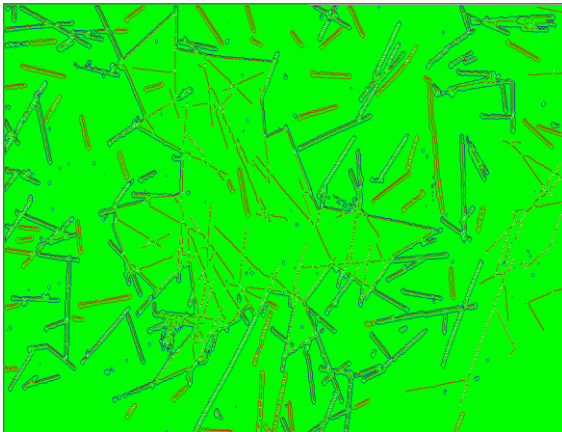

步骤 3：针状病毒分离结果

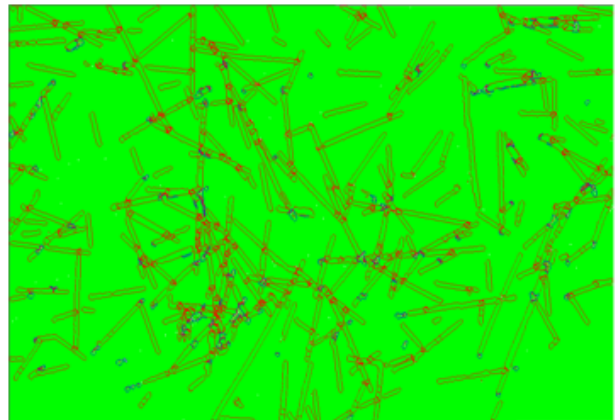

步骤 4：统合病毒外的物体并切除针状体。

■ 开发地、销售地



苏州比特速浪电子科技有限公司 图像营业部
e-Mail: Vision@bitstrong.com
URL: <http://www.bitstrong.com/chinese/>
Tel: 0512-55271320 Fax: 0512-55271330
邮编: 21530
昆山市伟业路18号现代广场A座616-617室

※此内容会不定期更新。

bitstrong Medical Imaging Products